



1,3 MP de 19 polegadas Monitor Médico de 19"

| 19HK312C |

Qualidade de imagem estável e otimizada

IPS de 1,3 MP * I 330 cd / m2 (typ.) Com NTSC 72%


O Monitor 19" 1.3MP com Painel IPS oferece uma qualidade de imagem excepcional com um amplo ângulo de visão de 178° e, ajustes de altura/ oferecendo reprodução de imagem nítida para análises precisas.

* 1,3 MP (Mega Pixel): 1280 x 1024

Garantia para uma análise de imagens confiáveis

Estabilização de brilho

Um sensor mede a estabilidade do brilho da luz de fundo e compensa automaticamente como flutuações de brilho causadas pelo envelhecimento para uma tela consistentemente estável durante a vida útil.

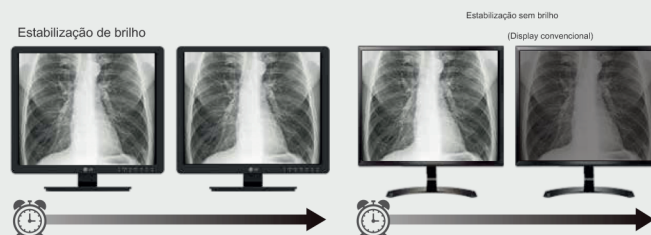

Propriedades antimicrobianas em seu acabamento

As propriedades antimicrobianas são aplicadas ao revestimento do monitor 19HK312C. Ele está em compliance com o padrão ISO22196, que é um antimicrobiano que é integrado para inibir o crescimento de bactérias.

Maior conforto de visualização

Modo Leitor de Flicker Safe

O Flicker Safe reduz o nível de tremulação na tela a quase zero, o que ajuda a minimizar o cansaço visual e a fadiga visual.

Além disso, o Modo Leitor reduz a luz azul que pode ser prejudicial aos olhos, para que os médicos possam trabalhar confortavelmente ao longo do dia.

Suporte ergonômico com pivot bidirecional

Com o recurso de pivot bidirecional permite a rotação da tela 90° para ambos os lados, tornando mais conveniente o uso com os softwares de diagnóstico.

Especificação

		19HK312C
Modelo		
Painel	Tipo de Painel	IPS
	Polegadas (Proporção)	19" (4:5)
	Resolução	1,3 MP (1280 x 1024)
	Tratamento de Superfície	Anti-reflexo, 3H
	Gama de Cores (típica)	16,7 milhões/ NTSC 72% (cobertura)
	Ângulo de visão (CR≥10)	178° / 178°
	Brilho (típico)	330 cd / m ²
	Relação de Contraste (típico)	900: 1
Características	Tempo de resposta (GTG *)	14 ms / 5ms (Faster)
	Compatível com DICOM	Sim
Sinais de vídeo	Calibração HW	Sim (True Color Pro)
	Conexões de Entradas	D-Sub x1, DVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1
Conectividade	USB	1 upstream, 2 downstream
Energia	Entrada AC	100-240 Vac, 50/60 Hz
	Consumo de energia (máx.)	50W
	Modo de Economia de Energia	Menos de 0,5 W
Certificações e padrões		INMETRO/ANVISA, IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2), EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024) cUL (ANSI / AAMI ES 60601-1, CSA CAN / CSA-C22.2 NO. 60601-1) FCC (FCC parte 15 Classe A), FDA (Registro (Classe I)), RoHS, REACH, WEEE
Conveniência do usuário	Flicker Safe/ Reader Mode	Sim/ Sim
Especificações	Peso (sem suporte)	2,9 kg (6,4 lb)
	Peso (com suporte)	5,1 kg (11,2 lb)
	Suporte Ajustável	Inclinação: -5 ~ 35 °, Giro: ± 177,5 °, Faixa de Altura: 130 mm, Pivot: ± 90 °

* GTG: Tempo de resposta cinza a cinza

